

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2005 年 3 月 3 日 (03.03.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/019827 A1(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: G01N 33/574

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/009805

(22) 国際出願日: 2004 年 7 月 9 日 (09.07.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願2003-296216 2003 年 8 月 20 日 (20.08.2003) JP(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立  
行政法人科学技術振興機構 (JAPAN SCIENCE AND  
TECHNOLOGY AGENCY) [JP/JP]; 〒3320012 埼玉県  
川口市本町 4-1-8 Saitama (JP). 愛知県 (LOCAL  
GOVERNMENT OF AICHI PREFECTURE) [JP/JP];  
〒4608501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目 1 番  
2 号 Aichi (JP). 和光純薬工業株式会社 (WAKO PURE  
CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒5408605  
大阪府大阪市中央区道修町三丁目 1-2 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 神奈木 玲児  
(KANNAGI, Reiji) [JP/JP]; 〒4650054 愛知県名古屋  
市名東区高針台二丁目 804 Aichi (JP). 井澤 孝子  
(IZAWA, Mineko) [JP/JP]; 〒4890876 愛知県瀬戸市  
白山町 2-1 51 Aichi (JP). 村松 喬 (MURAMATSU,  
Takashi) [JP/JP]; 〒4680021 愛知県名古屋市天白区  
平針黒石 845 平針住宅六街区 5 Aichi (JP). 内村  
健治 (UCHIMURA, Kenji) [JP/US]; 94121 カリフォル  
ニア州 94121 サンフランシスコ 19 番街  
295-6 California (US). 細川 秀明 (HOSOKAWA,Hideaki) [JP/JP]; 〒5650814 大阪府吹田市千里丘西  
24-3 フォレストシティ千里丘 C-808 Osaka  
(JP).(74) 代理人: 下田 昭 (SHIMODA, Akira); 〒1040031 東京  
都中央区京橋 3-3-4 京橋日英ビル 4 階 Tokyo (JP).(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が  
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,  
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,  
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,  
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,  
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,  
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,  
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,  
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可  
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,  
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,  
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,  
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,  
IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,  
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,  
TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

— 補正書

— 電子形式により別個に公開された明細書の配列表部  
分、請求に基づき国際事務局から入手可能2 文字コード及び他の略語については、定期発行される  
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語  
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: METHOD OF EXAMINING COLON CANCER AND COLON ADENOMA

(54) 発明の名称: 大腸癌及び大腸腺腫の検査方法

(57) Abstract: It is intended to provide an examination method useful in diagnosing colon cancer and colon adenoma whereby a patient suffering from colon cancer and a patient with a high risk of colon cancer can be detected at a high ratio, and an examination reagent therefor. A remarkable difference in the distribution of sugar chain sulfating enzyme GlcNAc-6-sulfotransferase isozymes is found out between a noncancerous colon tissue and a colon cancer tissue/a colon adenoma tissue. Then, it is clarified that colon cancer and colon adenoma can be specifically detected by detecting GlcNAc-6-sulfated sugar chains in a definite range from tissues or fecal samples of patients by applying the above difference. By using MECA-79 antibody (Pharmingen Catalog No. 09961D, Becton Dickinson) reacting with GlcNAc-6-sulfated sugar chains specifically formed by enzymes occurring in colon cancer and colon adenoma, colon cancer and colon adenoma can be examined.

(57) 要約: 高率で大腸癌患者及び大腸癌の危険度の高い患者を検出することができる大腸癌及び大腸腺腫の診断に役立つ検査方法及び検査薬を提供する。糖鎖硫酸化酵素GlcNAc-6-硫酸基転移酵素のアイソザイムの分布に非癌大腸組織と大腸癌及び大腸腺腫組織との間で顕著な差異があることを見出し、これを応用することによって一定範囲のGlcNAc-6-硫酸化糖鎖群を患者組織や糞便検体から検出することにより大腸癌及び大腸腺腫を特異的に検出できることを明らかにした。大腸癌及び大腸腺腫組織に存在する酵素により特異的に生成されるGlcNAc-6-硫酸化糖鎖と反応するMECA-79抗体 (ファーマーミンゲン社製カタログ番号09961D、ベクトン・ディッキンソン社) を用いれば大腸癌及び大腸腺腫の検査ができる。

WO 2005/019827 A1

## 明 細 書

## 大腸癌及び大腸腺腫の検査方法

## 技術分野

- [0001] この発明は、ヒトの大腸癌及び大腸腺腫の検査方法、そのための抗体、及び検査薬に関する。

## 背景技術

- [0002] 大腸癌患者は年々増加しており、早期発見のための検査方法が必要とされている。現在、大腸癌の検査には便の免疫潜血反応や各種の腫瘍マーカーが利用されているが、いずれもその陽性率は満足出来るものではない。すなわち、大腸癌の検査のために用いられている便の免疫潜血反応検査の陽性率は50～60%であり、大腸癌の腫瘍マーカーとしては癌胎児性蛋白(carcino-embryonic antigen, CEA)、CA19-9、STXなどがあり治療効果の判定や再発のモニターとして用いられているが、早期大腸癌の発見に関して十分な腫瘍マーカーであるとはいえない。
- [0003] 脾曲部を境として大腸を右半と左半とに分けると、右半大腸癌は、広汎に大腸癌患者の検診に用いられている抗ヘモグロビン抗体を用いた便潜血検査で偽陰性となることが多いので、とくに右半大腸癌の早期診断率の上昇に貢献する検査法の開発が待たれている。大腸癌の発生母地とされる大腸腺腫の検体診断に至っては現在なお適切なものがなく、もっぱら内視鏡検査に頼らなければならない現状である。簡便な検査法で大腸腺腫の診断が可能になれば、内視鏡検査をすべきかどうかの振り分けに役立ち、大腸癌の早期発見に資すると考えられる。
- [0004] 正常大腸においては糖鎖の硫酸化がさかんであるが、大腸癌においては、糖鎖の硫酸化は顕著に低下することが知られており、大腸に多いガラクトースの3'-硫酸化も、あるいはN-アセチルグルコサミン(以下「GlcNAc」という。)の6-硫酸化も減少する(非特許文献1)。患者大腸癌組織及び非癌大腸組織においてGlcNAc-6-硫酸基転移酵素の多数のアイソザイムが知られているが、そのなかでI-GlcNAc6STは癌化にとまって顕著に減少するため、大腸癌における糖鎖の硫酸化の顕著な低下が説明される(非特許文献2)。他方、非癌大腸のアイソザイムのひとつであるGlcNAc6ST-1は

、癌化にともなって量的に顕著な変化を示さない。さらに、他のアイソザイムである HEC-GlcNAc6STは癌で顕著に増加する(非特許文献3)。

[0005] 癌で増加するHEC-GlcNAc6STは6-硫酸化GlcNAcを合成するが、この酵素はいろいろな糖鎖中のGlcNAcを硫酸化するので、実際に細胞内で合成される糖鎖の構造と抗原性はきわめて多様である。一方、GlcNAc6ST-1やI-GlcNAc6STも6-硫酸化GlcNAcを合成するため、6-硫酸化GlcNAcがHEC-GlcNAc6STにより合成されるというだけでは、癌の特異的診断に用いることができない。

しかし、GlcNAc6ST-1及びI-GlcNAc6STの基質特異性はHEC-GlcNAc6STよりも狭いことが判明している(非特許文献3, 4)。このため、GlcNAc6ST-1やI-GlcNAc6STであまり合成されず、HEC-GlcNAc6STだけが合成できる6-硫酸化糖鎖が存在する可能性が強く示唆されるが、いままで大腸癌を診断できるような具体的な系は作られてはいなかった。

[0006] 一方、リンパ球の免疫学的ホーミングリセプターに対する抗体として市販されているモノクローナル抗体(MECA-79抗体)(非特許文献5)が化学合成品のGlcNAc 6-硫酸化糖鎖と反応することが知られている(非特許文献6)。更に、マウスのHEC-GlcNAc6ST酵素を、CHO細胞(ハムスターの卵巣の細胞)に遺伝子導入すると、細胞表面にこの抗体(MECA-79)が認識する抗原が出現することが報告されている(非特許文献7)。しかし、ヒトの癌細胞においてこのMECA-79抗体が認識する抗原が存在しているかどうかについては知られていなかった。

[0007] 非特許文献1:Izawa, M. et al., Cancer Res., 60: 1410-1416, 2000

非特許文献2:第22回日本分子腫瘍マーカー研究会講演予稿集, pp. 42-43, 2002

非特許文献3:Seko, A. et al., Glycobiology, 10: 919-929, 2000

非特許文献4:Seko, A. et al., Glycobiology, 12: 379-388, 2002

非特許文献5:Streeter, P.R. et al., J. Cell Biol. 107: 1853-1862, 1988

非特許文献6:Bruehl, R.E. et al., J. Biol. Chem. 275: 32642-32648, 2000

非特許文献7:Yeh, J.C. et al., Cell 105: 957-969, 2001

#### 図面の簡単な説明

[0008] [図1]大腸癌細胞株(COLO201細胞)と正常大腸上皮細胞株(トリコスタチンA処理し

たSW480細胞)について、MECA-79抗体を用いたフローサイトメトリー解析結果を示す図である。aは、大腸癌細胞株(COLO201細胞)と正常大腸上皮細胞株(SW480細胞)の選定を示す。bは、抗6-硫酸化糖鎖抗体についてこの2種の細胞との反応性のフローサイトメトリー法による解析結果を示す。縦軸は細胞頻度(細胞個数)、横軸は蛍光強度(Arbitrary Unit)を表す。

[図2]HEC-GlcNAc6ST遺伝子、GlcNAc6ST-1遺伝子、I-GlcNAc6ST遺伝子を導入した細胞について、フローサイトメトリー法によるMECA-79抗体との反応性を示す図である。縦軸は細胞頻度(細胞個数)、横軸は蛍光強度(Arbitrary Unit)を表す。

[図3]MECA-79抗体を用いた患者大腸癌組織の染色写真を示す図である。Caは癌組織、Nは非癌大腸組織を示す。

[図4]患者大腸癌組織と非癌大腸組織についてMECA-79抗体を用いた染色写真を示す図である。a-cにおいて、Caは癌組織、Nは非癌大腸組織を示す。dにおいて、Nは非腺腫大腸組織、Aは腺腫細胞を示す。黒い部分(カラーでは焦げ茶色)は、抗体で認識される抗原が存在することを示し、灰色部分(カラーでは薄い青色)は、メチレンブルーによる対照染色を示す。

[図5]患者糞便抽出物中のMECA-79抗体の反応性を示す図である。上から各列は大腸癌症例8例、大腸腺腫症例8例、良性疾患8例、健常人8例の成績を示す。

[図6]MECA-79抗体(ファーマンジェン社カタログ番号09961D)のカタログを示す図である。

[図7]MECA-79抗体(ファーマンジェン社カタログ番号09961D)のカタログを示す図である。

## 発明の開示

### 発明が解決しようとする課題

- [0009] 本発明は、高率で大腸癌患者及び大腸癌の危険度の高い患者を検出することができる大腸癌及び大腸腺腫の診断に役立つ検査方法及び検査薬を提供する。

### 課題を解決するための手段

- [0010] 本発明者等は検討の結果、糖鎖硫酸化酵素GlcNAc-6-硫酸基転移酵素のアイソザイムの分布に非癌大腸組織と大腸癌及び大腸腺腫組織との間で顕著な差異があ


ることを見出し、GlcNAc6ST-1やI-GlcNAc6STであまり合成されず、HEC-GlcNAc6STだけが合成できる6-硫酸化糖鎖を患者組織や糞便検体から検出することにより大腸癌及び大腸腺腫を特異的に検出できることを明らかにした。

従来GlcNAc-6-硫酸化糖鎖と反応する抗体として、AG223 (Biochem. (Tokyo), 124: 670-678, 1998)、G152, G72, AG97, AG107, AG273, G2706, G27011, G27039 (以上、J. Biol. Chem., 273: 11225-11233, 1998)等多数が知られている。一方、リンパ球の免疫学的ホーミングリセプターに対する抗体として市販されているMECA-79抗体(ファーマンジェン社製カタログ番号09961D、ベクトン・ディッキンソン社販売)もまた何らかのGlcNAc-6-硫酸化糖鎖と反応することが知られている(非特許文献6)。これらの抗体のうち、正常大腸上皮細胞に見られるGlcNAc-6-硫酸化糖鎖をよく発現する細胞とは反応性が弱いあるいは皆無であり、癌で増加するGlcNAc-6-硫酸化糖鎖をよく発現する細胞との反応性が高い抗体を求めてスクリーニングし、得られた抗体を患者由来の検体を対象に用いて検索したところ、大腸癌に高率に陽性となることが判明し、本発明を完成させるに至った。

[0011] 即ち、本発明は、被検者の組織、体液若しくは糞便又はこれらの抽出物に対する抗体の反応性の有無又は反応強度を検査することから成る大腸癌及び大腸腺腫の検査方法であって、該抗体が、GlcNAc-6-硫酸基転移酵素HEC-GlcNAc6ST遺伝子を発現する細胞に存在し、GlcNAc6ST-1又はI-GlcNAc6ST遺伝子を発現する細胞には存在しないか又は微量にしか存在しない抗原と特異的に反応することを特徴とする検査方法である。

この抗原は、GlcNAc-6-硫酸基転移酵素HEC-GlcNAc6ST遺伝子を導入した細胞に存在し、GlcNAc6ST-1又はI-GlcNAc6ST遺伝子を導入した細胞には存在しないか又は微量にしか存在しないものであってもよい。

[0012] この抗原は下記一般式

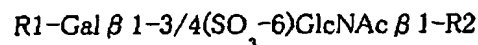

(式中、R1は他の酵素群によって付加される糖残基であり特に構造は限定されない。Gal  $\beta$  は  $\beta$  ガラクトースを表し、GlcNAc  $\beta$  は  $\beta$  N-アセチルグルコサミンを表し、Gal  $\beta$  1-3/4は、Gal  $\beta$  の1位とGlcNAc  $\beta$  の3位及び/又は4位とが結合することを示し、(SO<sub>3</sub>

-6)はGlcNAc  $\beta$  の6位に硫酸基が付加していることを示し、R2は-3GalNAc  $\alpha$ 、-3Gal  $\beta$  又は-2Man  $\alpha$ を表し、GlcNAc  $\beta$  の1位に結合する。)で表される糖鎖を有する。

この抗体として、MECA-79抗体(ファーミンジェン社カタログ番号09961D、図6及び図7に示す。)が好ましい。

また、本発明は、被検者の組織、体液若しくは糞便又はこれらの抽出物に対する、MECA-79抗体又はこれの同等物の反応性を検査することから成る大腸癌及び大腸腺腫の検査方法である。


[0013] また、本発明は、更にこの抗体に標識を付したプローブを反応させ、この標識を定性的又は定量的に検出することから成る上記いずれかの検査方法である。

好ましい検査方法は、患者の組織、体液若しくは糞便又はこれらの抽出物中に存在する抗原を支持体に固定し、これに抗体を反応させ、これに標識を付したプローブを反応させ、この標識を検出することから成る。各工程間に適宜洗浄工程を入れることが好ましい。このプローブとしては、抗ヒトIgG抗体、プロテインG、プロテインA、プロテインLなどが挙げられる。このプローブには通常標識を付す。この標識としては、放射性同位元素( $^{125}\text{I}$ )、酵素(ペルオキシダーゼ、アルカリフォスファターゼ)が挙げられる。酵素抗体を用いた場合には、基質を反応させてその変化(着色等)を観察すればよい。

[0014] また、本発明は、GlcNAc-6-硫酸基転移酵素HEC-GlcNAc6ST遺伝子を発現する細胞に存在し、GlcNAc6ST-1又はI-GlcNAc6ST遺伝子を発現する細胞には存在しないか又は微量にしか存在しない糖鎖を有する抗原と特異的に反応する抗体(但し、MECA-79抗体を除く。)である。

また、本発明は、GlcNAc-6-硫酸基転移酵素HEC-GlcNAc6ST遺伝子を導入した細胞に存在し、GlcNAc6ST-1又はI-GlcNAc6ST遺伝子を導入した細胞には存在しないか又は微量にしか存在しない糖鎖を有する抗原と特異的に反応する抗体(但し、MECA-79抗体を除く。)である。

[0015] また、本発明は、大腸癌又は大腸腺腫患者の組織、体液若しくは糞便中に存在し、下記一般式

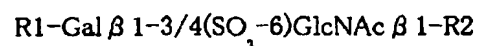


(式中、各記号は上記と同様である。)で表される糖鎖を有する抗原と特異的に反応する抗体(但し、MECA-79抗体を除く。)である。

更に、本発明は、MECA-79抗体を含むこれらいずれかの抗体を主成分とする大腸癌及び大腸腺腫の検査薬である。

#### 発明を実施するための最良の形態

- [0016] GlcNAc6ST-1やI-GlcNAc6STであまり合成されず、HEC-GlcNAc6STだけが合成できる6-硫酸化糖鎖の構造は、一般式

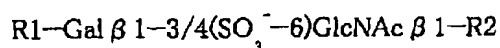

で表される。

- [0017] 体内にはGlcNAc-6-硫酸化酵素が働く相手であるGlcNAc  $\beta$  は、様々な糖鎖担体に担われている。R2はその担体を示す。

我々及び他の研究者による研究から、HEC-GlcNAc6STはこれまで試されたすべてのGlcNAc  $\beta$  1-R2に硫酸基を転移する能力を持つことが判明している(非特許文献4、7等)。これに対してGlcNAc6ST-1及びI-GlcNAc6STは、特定のR2部分を持つ場合のみ硫酸基を転移する能力を持つ。

HEC-GlcNAc6STが硫酸基を転移するが、GlcNAc6ST-1及びI-GlcNAc6STがあまり硫酸基を転移できないのは、R2が-3GalNAc  $\alpha$  である場合(硫酸化後の構造は $SO_3^-$ -6GlcNAc  $\beta$  1-3GalNAc  $\alpha$  となる)と、-3Gal  $\beta$  である場合(硫酸化後の構造は $SO_3^-$ -6GlcNAc  $\beta$  1-3Gal  $\beta$  となる)と、-2Man  $\alpha$  である場合(硫酸化後の構造は $SO_3^-$ -6GlcNAc  $\beta$  1-2Man  $\alpha$  となる)であることが判明している(J. Biol. Chem., 277: 3979-3984, 2002及びGlycobiology, 12: 379-388, 2002)。本発明の検査法においては、これら三者のいずれかに特異的な抗体を用いてもよいし、また三者の糖鎖のすべてと交叉反応する抗体でもよい。

- [0018] 細胞内でGlcNAc-6-硫酸化酵素は、糖鎖末端のGlcNAcに硫酸基を付加して上記のように6-硫酸化GlcNAc(即ち、 $SO_3^-$ -6GlcNAc)を合成する。しかし、糖鎖末端に6-硫酸化GlcNAcが生じた後にも、細胞内では他の酵素群によってさらにこれに糖残基(R1)が付加されるので、最終的に合成され細胞から産生される糖鎖の構造と抗原性は多種多様となる。通常6-硫酸化GlcNAcにまず付加される構造はGal  $\beta$  1-4及び

Gal  $\beta$  1-3である(Gal  $\beta$  1-3/4と表記する)。さらにこれに加えて、NeuAc  $\alpha$  2-3/6、SO<sub>3</sub><sup>-</sup> 3/6、Fuc  $\alpha$  1-2/3/4が付加することが一般的に知られている。このR1部分はGlcNAc-6-硫酸化酵素による6-硫酸化GlcNAcの合成が終わったのちに、あとになって付加されるものである。このためR1部分はHEC-GlcNAc6ST、GlcNAc6ST-1やI-GlcNAc6STなどのGlcNAc-6-硫酸化酵素の基質特異性とは関わりがない。

[0019] このような糖鎖を有する抗原は、大腸癌患者から生検あるいは外科手術で得られたがん組織や、それに由来する物質を含む血清・腹水・糞便などの検体に存在する。またこれらから、この抗原をリン酸緩衝食塩水などで簡単に抽出することが出来る。またこの糖鎖抗原に対する抗体は公知の抗体産生技術(たとえばMethods in Enzymology, 312: 160-179, 2000; Methods in Molecular Biology, 199: 203-218, 2002など)を用いて得ることが出来る。

[0020] 本法で検出されるGlcNAc-6-硫酸化糖鎖は大腸癌のみならず大腸癌の発生母地とされる大腸腺腫にも陽性を示し、スクリーニング検査に用いることによって、内視鏡などの精査や経過観察を要する大腸腺腫患者群を検出できる。大腸癌のスクリーニング検査に現在よく用いられる抗ヘモグロビン抗体による潜血検査に比べて大腸腺腫の検出率が高い。また、本法で検出される6-硫酸化糖鎖は大腸を右半と左半とに分けるとともに右半大腸に多いため、上記の診断は右半大腸に出来た大腸癌及び大腸腺腫の診断にとくに有用と考えられる。右半大腸癌は、普通用いられている抗ヘモグロビン抗体を用いた便潜血検査で陽性に出ないことが多いので、本発明の方法を併用すれば、右半大腸癌の診断率の上昇に飛躍的に貢献すると考えられる。

以下、実施例にて本発明を例証するが、本発明を限定することを意図するものではない。

#### 実施例 1

[0021] まず、ヒト由来の大腸癌細胞株と正常大腸上皮細胞株についてRT-PCR法を用いてGlcNAc-6-硫酸化酵素アイソザイムの遺伝子発現をしらべた。

RT-PCR解析において、HEC-GlcNAc6ST遺伝子(Genebank AF131235)発現の検出用のPCRプライマーとしてupper strand側は配列番号1、lower strand側は配列番号2の合成オリゴヌクレオチドを用い(Tm=59℃)、GlcNAc6ST-1遺伝子(Genebank



AB011451)発現検出用のプライマーとしてupper strand側は配列番号3、lower strand側は配列番号4の合成オリゴヌクレオチドを用い( $T_m=62^{\circ}\text{C}$ )、I-GlcNAc6ST遺伝子(Genebank AF176838)発現検出用のPCRプライマーとして、upper strand側は配列番号5、lower strand側は配列番号6の合成オリゴヌクレオチドを用いた( $T_m=60^{\circ}\text{C}$ )。

その結果を図1aに示す。HEC-GlcNAc6ST遺伝子を強く発現し、GlcNAc6ST-1及びI-GlcNAc6ST遺伝子をほとんど発現しない細胞として、COLO201細胞が典型的な大腸癌パターンを示す細胞であることが判明した。また、HEC-GlcNAc6ST遺伝子をほとんど発現せず、GlcNAc6ST-1及びI-GlcNAc6ST遺伝子を有意に発現する細胞として、SW480細胞をトリコスタチンA処理したTSA-SW480細胞が典型的な正常上皮パターンを示す細胞であることが判明した。

[0022] 次に、多数の抗6-硫酸化糖鎖抗体についてこの二種の細胞との反応性をスクリーニングし、COLO201細胞とよく反応し、TSA-SW480細胞と反応しない抗体を探索した。

細胞と抗体との反応性のスクリーニングには間接蛍光抗体法(一次抗体 $1.0\mu\text{g/ml}$ 、 $4^{\circ}\text{C}$ 、30 min. 二次抗体はZymed Laboratories社のウサギ抗ラットIgM抗体、 $4^{\circ}\text{C}$ 、30 min.)で染色したのちにFACScan (Becton Dickinson社)にてフローサイトメトリー解析を行った。

典型的な解析結果を図1bに示す。MECA-79抗体(ファーマンジェン社製カタログ番号09961D、ベクトン・ディッキンソン社販売)がCOLO201細胞とよく反応し、TSA-SW480細胞と反応性の低い抗体であり、大腸癌診断の検査に適した抗体であることが判明した。これに対して、対照として用いたG72抗体(J. Biol. Chem. 273:11225-11233, 1998)はCOLO201細胞とTSA-SW480細胞の両方の細胞と有意に反応し、大腸癌診断の検査には適当でないことが分かる。

## 実施例 2

[0023] 本実施例ではHEC-GlcNAc6ST遺伝子、GlcNAc6ST-1遺伝子、I-GlcNAc6ST遺伝子をそれぞれ導入した細胞を作成した。これらの細胞についてMECA-79抗体を用いてフローサイトメトリー解析を行った。

HEC-GlcNAc6STの遺伝子導入細胞の作成には遺伝子(Genebank AF131235)を

pCDNA3.1ベクターに導入したものを用い、GlcNAc6ST-1の遺伝子導入細胞の作成には遺伝子(Genebank AB011451)をpIRES1hygroベクターに導入したものを用い、I-GlcNAc6STの遺伝子導入細胞の作成には遺伝子(Genebank AF176838)をpCDNA3.1ベクターに導入したものを用いた。フローサイトメリー法は実施例1と同じ方法で行った。

結果を図2に示す。MECA-79抗体はHEC-GlcNAc6ST遺伝子導入細胞と極めて強く反応し、GlcNAc6ST-1遺伝子導入細胞やI-GlcNAc6ST遺伝子導入細胞とはごく弱くしか反応しなかった。

### 実施例 3

[0024] MECA-79抗体を用いて免疫組織学的染色で患者由来の大腸癌組織(31例)を染色した。免疫組織学的染色には、厚さ10 $\mu$ mの凍結切片を用い、一次抗体として1.0 $\mu$ g/mlのMECA-79抗体を用い、抗ラットIgM抗体を二次抗体とするベクター社の試薬キット(Vectastain)を会社の説明書通りに用いて行った。

その結果を図3に示す。本抗体は非癌大腸粘膜(N)には反応せず(31例中0例、0%)、癌組織(Ca)に31例中10例(32%)に反応が見られた。特に右半大腸に生じた癌に陽性率が比較的高く(60%)、左半大腸での陽性率は低かった(19%)。

[0025] 典型的な染色写真を図4に示す。

図4aは、患者大腸癌組織(Ca)と非癌大腸組織(N)の染色写真を示す。癌組織で強く抗体に強く染まっているが、非癌大腸組織はほとんど染まっていない。

図4bは、同じ組織を、AG107抗体を用いて染めたものを示す。AG107抗体は通常GlcNAc-6-硫酸化糖鎖一般と反応するため、aとは逆に癌組織(Ca)よりも非癌大腸組織(N)のほうがずっとよく抗体に染まっており、GlcNAc-6-硫酸化糖鎖というだけでは癌を特異的に検出することができないことを示している。即ち、大腸癌及び大腸腺腫に多い特定のGlcNAc-6-硫酸化糖鎖の分子種を検出するMECA-79のような抗体を用いたときにのみ特異的な検出が可能である。

図4cは右半由来の大腸癌組織における発現例を示す。癌組織が強染しており、極めて強い発現があることがわかる。

図4dは大腸腺腫性ポリープにおける発現を示す。Nは非腺腫大腸組織、Aは腺腫

細胞を示す。Aで示す腺腫の部分でMECA-79抗体によってよく染まっている。癌でなく腺腫性ポリープでも、MECA-79で検出されるGlcNAc-6-硫酸化糖鎖が多量に出現していることを示す。良性疾患でありながら大腸癌の発生母地とされる腺腫性ポリープを確実に検査できることが分かる。

#### 実施例 4

[0026] 本実施例では、大腸癌患者の糞便抽出液に対してMECA-79抗体を用いた酵素免疫測定によってほんとうに患者糞便中にこうしたGlcNAc-6-硫酸化糖鎖が出現しているかどうかを簡易な定性法により確認した。糖鎖抗原によっては糞便中細菌の分泌する酵素によって分解を受け、糞便中に検出されないおそれがあるためであり、この点の確認は本発明の実施可能性を考える上で重要である。

ヒト便0.1gを便抽出バッファー(10 mM PBS, 1% BSA, pH 7.5)1ml中に分散後、4℃、8000g、15分間遠心分離を行い、得られた上清40  $\mu$  Lに同バッファー120  $\mu$  L加えサンプルとした。これをPVDF膜 (Immobilon、ミリポア、Lot K2JN2659B)に吸引プロットし、非特異反応をブロックしたのち、MECA-79抗体、ウサギ抗ラットIgM抗体、POD標識-ヤギ抗ウサギIgG抗体、アビジン-ビオチン複合体溶液を順次反応させ、NTB基質液にて発色させた。


その結果を図5に示す。大腸癌症例8例中4例(50%)、大腸腺腫症例8例中4例(50%)に陽性であり、良性疾患では1例に弱い陽性を認めるのみで、健常人はほぼ全例陰性であった。

## 請求の範囲

- [1] 被検者の組織、体液若しくは糞便又はこれらの抽出物に対する抗体の反応性の有無又は反応強度を検査することから成る大腸癌及び大腸腺腫の検査方法であって、該抗体が、GlcNAc-6-硫酸基転移酵素HEC-GlcNAc6ST遺伝子を発現する細胞に存在し、GlcNAc6ST-1又はI-GlcNAc6ST遺伝子を発現する細胞には存在しないか又は微量にしか存在しない抗原と特異的に反応することを特徴とする検査方法。
- [2] 前記抗原が、GlcNAc-6-硫酸基転移酵素HEC-GlcNAc6ST遺伝子を導入した細胞に存在し、GlcNAc6ST-1又はI-GlcNAc6ST遺伝子を導入した細胞には存在しないか又は微量にしか存在しない請求項1に記載の検査方法。
- [3] 前記抗原が下記一般式
- $$R1-Gal \beta 1-3/4(SO_3-6)GlcNAc \beta 1-R2$$
- (式中、R1は他の酵素群によって付加される糖残基であり特に構造は限定されない。Gal  $\beta$  は  $\beta$  ガラクトースを表し、GlcNAc  $\beta$  は  $\beta$  N-アセチルグルコサミンを表し、Gal  $\beta$  1-3/4は、Gal  $\beta$  の1位とGlcNAc  $\beta$  の3位及び／又は4位とが結合することを示し、(SO<sub>3</sub>-6)はGlcNAc  $\beta$  の6位に硫酸基が付加していることを示し、R2は-3GalNAc  $\alpha$ 、-3Gal  $\beta$  又は-2Man  $\alpha$  を表し、GlcNAc  $\beta$  の1位に結合する。)で表される糖鎖を有する請求項1又は2に記載の検査方法。
- [4] 前記抗体がMECA-79抗体(ファーマンジェン社カタログ番号09961D)である請求項1〜3に記載の検査方法。
- [5] 被検者の組織、体液若しくは糞便又はこれらの抽出物に対する、MECA-79抗体又はこれの同等物の反応性を検査することから成る大腸癌及び大腸腺腫の検査方法。
- [6] 前記抗体に標識を付したプローブを反応させ、この標識を定性的又は定量的に検出することから成る請求項1〜5のいずれか一項に記載の検査方法。
- [7] GlcNAc-6-硫酸基転移酵素HEC-GlcNAc6ST遺伝子を発現する細胞に存在し、GlcNAc6ST-1又はI-GlcNAc6ST遺伝子を発現する細胞には存在しないか又は微量にしか存在しない糖鎖を有する抗原と特異的に反応する抗体(但し、MECA-79抗体を除く。)
- [8] GlcNAc-6-硫酸基転移酵素HEC-GlcNAc6ST遺伝子を導入した細胞に存在し、

GlcNAc6ST-1又はI-GlcNAc6ST遺伝子を導入した細胞には存在しないか又は微量にしか存在しない糖鎖を有する抗原と特異的に反応する抗体(但し、MECA-79抗体を除く。 )。

- [9] 大腸癌又は大腸腺腫患者の組織、体液若しくは糞便中に存在し、下記一般式

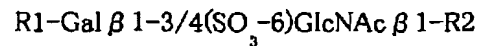

(式中、R1は他の酵素群によって付加される糖残基であり特に構造は限定されない。

Gal  $\beta$  は  $\beta$  ガラクトースを表し、GlcNAc  $\beta$  は  $\beta$  N-アセチルグルコサミンを表し、Gal  $\beta$  1-3/4は、Gal  $\beta$  の1位とGlcNAc  $\beta$  の3位及び/又は4位とが結合することを示し、(SO<sub>3</sub>-6)はGlcNAc  $\beta$  の6位に硫酸基が付加していることを示し、R2は-3GalNAc  $\alpha$ 、-3Gal  $\beta$  又は-2Man  $\alpha$ を表し、GlcNAc  $\beta$  の1位に結合する。)で表される糖鎖を有する抗原と特異的に反応する抗体(但し、MECA-79抗体を除く。 )。

- [10] MECA-79抗体又は請求項7-9のいずれか一項に記載の抗体を主成分とする大腸癌及び大腸腺腫の検査薬。

## 補正書の請求の範囲


[2004年11月4日 (04. 11. 04) 国際事務局受理：出願当初の請求の範囲7-10は補正された；他の請求の範囲は変更なし。(2頁)]

1. 被検者の組織、体液若しくは糞便又はこれらの抽出物に対する抗体の反応性の有無又は反応強度を検査することから成る大腸癌及び大腸腺腫の検査方法であって、該抗体が、GlcNAc-6-硫酸基転移酵素 HEC-GlcNAc6ST 遺伝子を発現する細胞に存在し、GlcNAc6ST-1 又は I-GlcNAc6ST 遺伝子を発現する細胞には存在しないか又は微量にしか存在しない抗原と特異的に反応することを特徴とする検査方法。
2. 前記抗原が、GlcNAc-6-硫酸基転移酵素 HEC-GlcNAc6ST 遺伝子を導入した細胞に存在し、GlcNAc6ST-1 又は I-GlcNAc6ST 遺伝子を導入した細胞には存在しないか又は微量にしか存在しない請求項1に記載の検査方法。
3. 前記抗原が下記一般式
$$R1-Gal\beta 1-3/4(SO_3-6)GlcNAc\beta 1-R2$$
(式中、R1 は他の酵素群によって付加される糖残基であり特に構造は限定されない。Gal $\beta$  は $\beta$ ガラクトースを表し、GlcNAc $\beta$  は $\beta$ N-アセチルグルコサミンを表し、Gal $\beta$ 1-3/4 は、Gal $\beta$ の1位とGlcNAc $\beta$ の3位及び／又は4位とが結合することを示し、(SO<sub>3</sub>-6)はGlcNAc $\beta$ の6位に硫酸基が付加していることを示し、R2 は-3GalNAc $\alpha$ 、-3Gal $\beta$ 又は-2Man $\alpha$ を表し、GlcNAc $\beta$ の1位に結合する。)で表される糖鎖を有する請求項1又は2に記載の検査方法。
4. 前記抗体が MECA-79 抗体 (ファーミンジェン社カタログ番号 09961D) である請求項1～3に記載の検査方法。
5. 被検者の組織、体液若しくは糞便又はこれらの抽出物に対する、MECA-79 抗体又はこれの同等物の反応性を検査することから成る大腸癌及び大腸腺腫の検査方法。
6. 前記抗体に標識を付したプローブを反応させ、この標識を定性的又は定量的に検出することから成る請求項1～5のいずれか一項に記載の検査方法。
7. (補正後) GlcNAc-6-硫酸基転移酵素 HEC-GlcNAc6ST 遺伝子を発現する細胞に存在し、GlcNAc6ST-1 又は I-GlcNAc6ST 遺伝子を発現する細胞には存在しないか又は微量にしか存在しない糖鎖を有する抗原と特異的に反応する抗

体(但し、MECA-79 抗体を含む。)を主成分とする大腸癌及び大腸腺腫の検査薬。

8. (補正後) GlcNAc-6-硫酸基転移酵素 HEC-GlcNAc6ST 遺伝子を導入した細胞に存在し、GlcNAc6ST-1 又は I-GlcNAc6ST 遺伝子を導入した細胞には
- 5 存在しないか又は微量にしか存在しない糖鎖を有する抗原と特異的に反応する抗体(但し、MECA-79 抗体を含む。)を主成分とする大腸癌及び大腸腺腫の検査薬。



9. (補正後) 大腸癌又は大腸腺腫患者の組織、体液若しくは糞便中に存在し、下記一般式

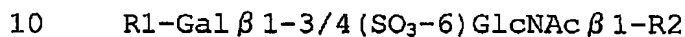

- (式中、R1 は他の酵素群によって付加される糖残基であり特に構造は限定されない。Gal $\beta$  は $\beta$ ガラクトースを表し、GlcNAc $\beta$  は $\beta$ N-アセチルグルコサミンを表し、Gal $\beta$  1-3/4 は、Gal $\beta$  の1位と GlcNAc $\beta$  の3位及び/又は4位とが結合することを示し、(SO<sub>3</sub>-6) は GlcNAc $\beta$  の6位に硫酸基が付加していることを
- 15 示し、R2 は-3GalNAc $\alpha$ 、-3Gal $\beta$  又は-2Man $\alpha$ を表し、GlcNAc $\beta$  の1位に結合する。)で表される糖鎖を有する抗原と特異的に反応する抗体(但し、MECA-79 抗体を含む。)を主成分とする大腸癌及び大腸腺腫の検査薬。


10. (補正後) MECA-79 抗体を主成分とする大腸癌及び大腸腺腫の検査薬。

[図1]

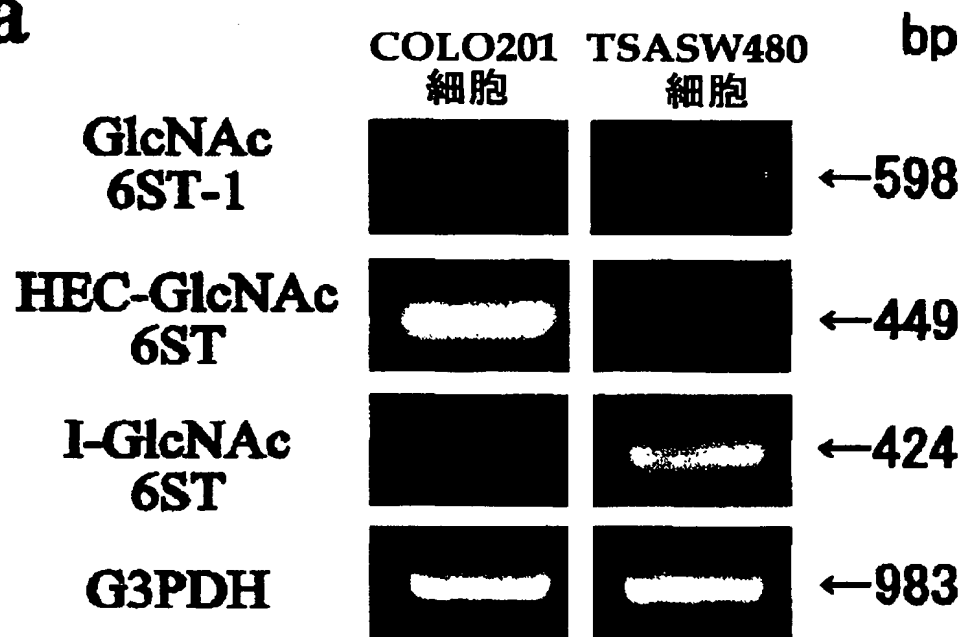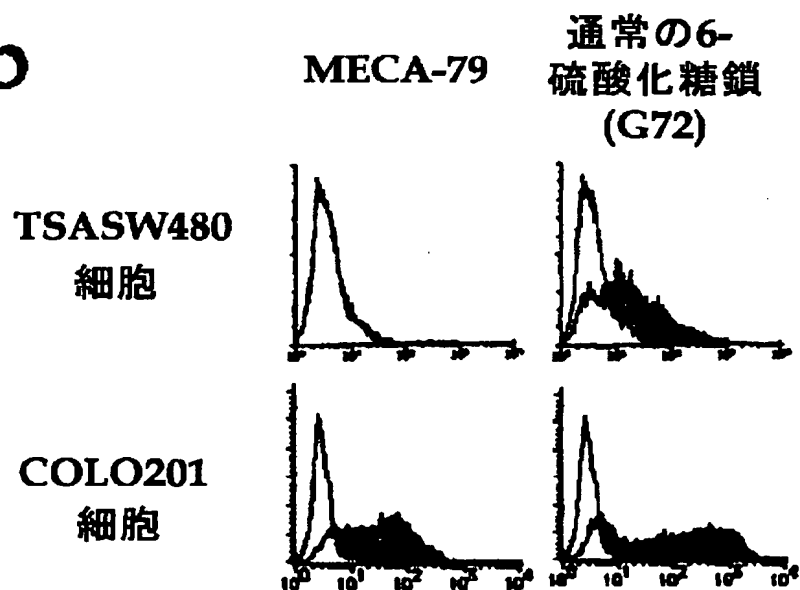
**a****b**




[図2]

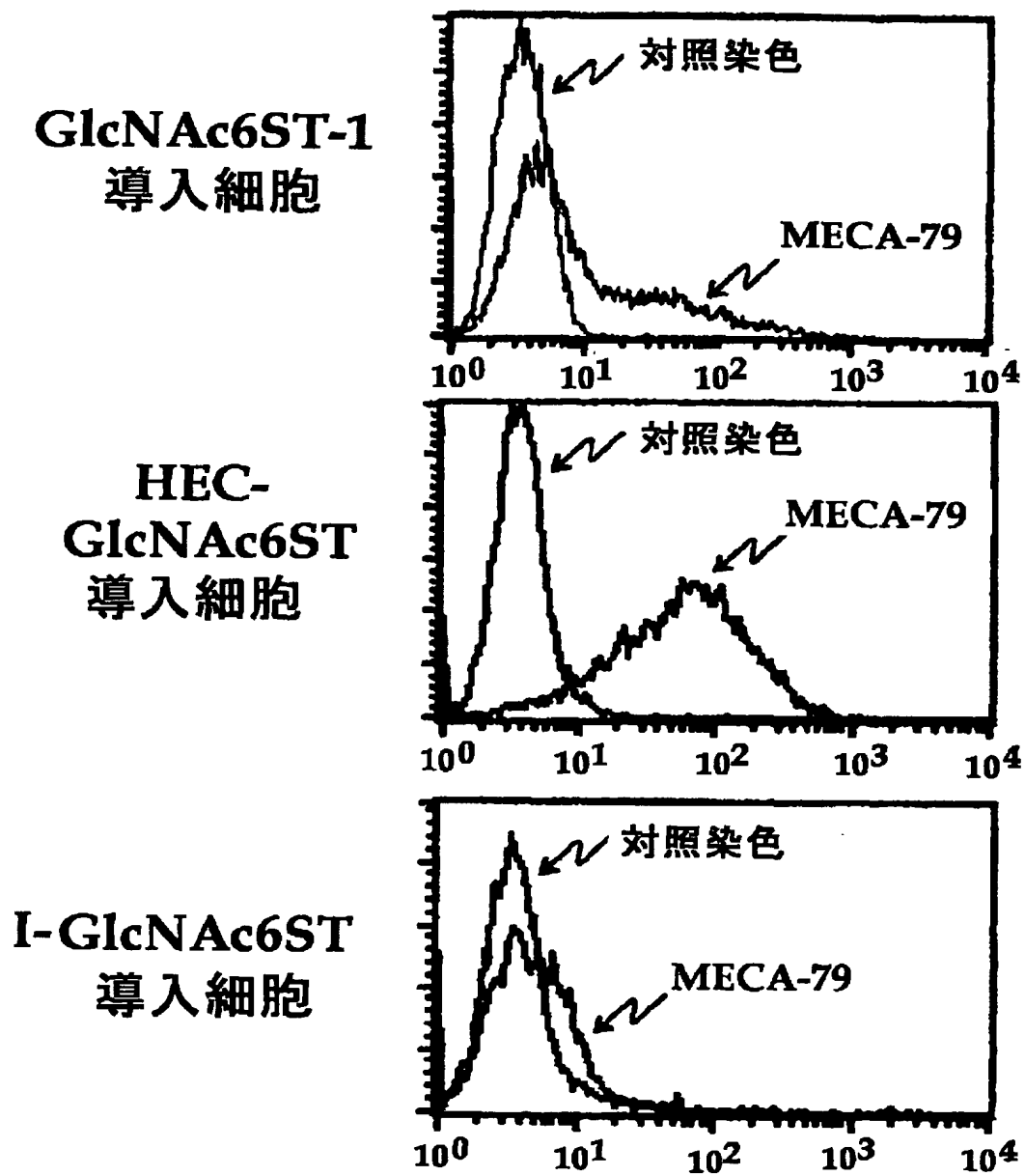

[図3]

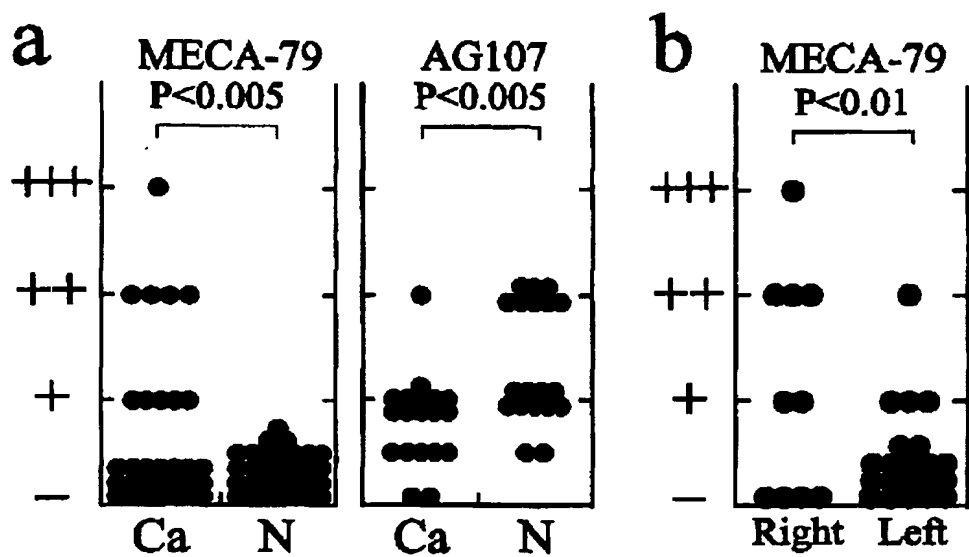

[図4]

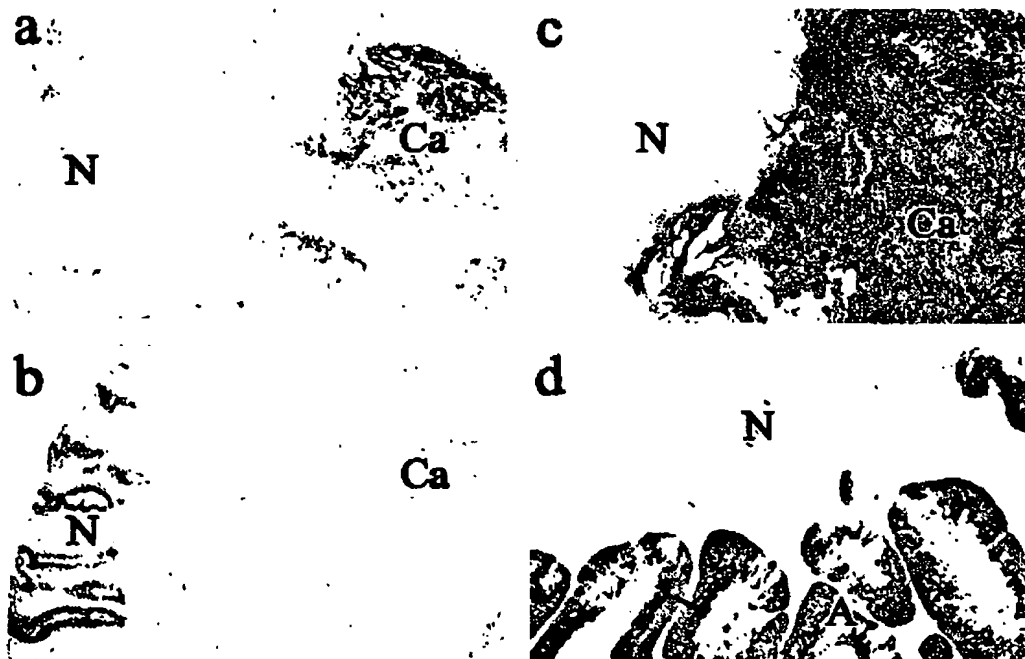

[図5]

検体

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

←大腸癌(8例)

←大腸腺腫(8例)

←良性大腸疾患(8例)

←健常人(8例)

[6]**BD PharMingen Technical Data Sheet**

Page 1 of 2

**PURIFIED RAT ANTI-MOUSE PNAd CARBOHYDRATE EPITOPE (CD62L Ligand) MONOCLONAL ANTIBODY****PRODUCT INFORMATION**

Catalog Number: **553863** (Was: 00961D), 0.5 mg  
 Description: Purified anti-mouse PNAd Carbohydrate Epitope (CD62L Ligand)  
 Clone: MECA-79  
 Immunogen: Collagenase-dispersed BALB/c lymph node stroma<sup>1</sup>  
 Isotype: Rat (Wistar) IgM,  $\kappa$   
 Contents: Purified immunoglobulin in 10 mM phosphate buffer, pH 7.2 with 500 mM NaCl and 0.09% (w/v) sodium azide.

**SPECIFICITY**

The MECA-79 antibody reacts with sulfate-dependent carbohydrate epitopes of peripheral lymph node addressin (PNAd).<sup>2</sup> The MECA-79-reactive antigen is closely associated with the carbohydrate ligands for L-selectin (e.g., CD34, GlyCAM-1, MAdCAM-1), which are expressed on high endothelial venules (HEV) in lymphoid tissues and at sites of chronic inflammation.<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Cross-reactivity with human,<sup>3,4</sup> ovine,<sup>7</sup> bovine,<sup>7</sup> primate,<sup>7</sup> and porcine<sup>8</sup> tissues has been observed. MECA-79 antibody inhibits L-selectin-dependent lymphocyte and platelet homing to lymph nodes *in vivo*,<sup>9</sup> and *in vitro* adhesion to lymphoid tissue HEV<sup>1,4</sup> and immobilized PNAd.<sup>3,9,10</sup>

**PREPARATION AND STORAGE**

The antibody was purified from tissue culture supernatant by affinity chromatography. The antibody solution should be stored undiluted at 4°C.

**USAGE**

This antibody has been tested by immunohistochemical staining (IHC) of citrate-pretreated formalin-fixed paraffin-embedded sections (5 - 20  $\mu$ g/ml) to assure specificity and reactivity. Other reported applications include IHC of acetone-fixed frozen sections,<sup>4,5</sup> immunoprecipitation<sup>2,3</sup> western blot analysis,<sup>10</sup> and *in vitro* and *in vivo* adhesion blocking.<sup>1,3,4,9,10</sup> Since applications vary, each investigator must determine dilutions appropriate for individual use.

Caution: Sodium azide is a reversible inhibitor of oxidative metabolism; therefore, antibody preparations containing this preservative agent must not be used in cell cultures nor injected into animals. Sodium azide may be removed by washing stained cells or plate-bound antibody or dialyzing soluble antibody in sodium azide-free buffer. Since endotoxin may also affect the results of functional studies, we recommend the NA/LE™ (No Azide/Low Endotoxin) antibody format for *in vitro* and *in vivo* use.

**REFERENCES**

1. Streeter, P.R., B.T.N. Rouse, and E.C. Butcher. 1988. Immunohistologic and functional characterization of a vascular addressin involved in lymphocyte homing into peripheral lymph nodes. *J. Cell Biol.* 107: 1853 - 1862.
2. Hemmerich, S., E.C. Butcher, and S.D. Rosen. 1994. Sulfation-dependent recognition of high endothelial venules (HEV)-ligands by L-selectin and MECA 79, an adhesion-blocking monoclonal antibody. *J. Exp. Med.* 180: 2219 - 2226.
3. Berg, E.L., M.K. Robinson, R.A. Warnock, and E.C. Butcher. 1991. The human peripheral lymph node vascular addressin is a ligand for LECAM-1, the peripheral lymph node homing receptor. *J. Cell Biol.* 114: 343 - 349.
4. Michie, S.A., P.R. Streeter, P.A. Bolt, E.C. Butcher, and L.J. Picker. 1993. The human peripheral lymph node vascular addressin. An inducible endothelial antigen involved in lymphocyte homing. *Am. J. Pathol.* 143: 1688 - 1698.
5. Paveseuw, C., M.-C. Cagnereault, and F. Lepault. 1994. Expression of homing and adhesion molecules in infiltrated islets of Langerhans and salivary glands of nonobese diabetic mice. *J. Immunol.* 152: 5969 - 5978.

Please see Page 2.

BD Biosciences [www.bdbiosciences.com](http://www.bdbiosciences.com)**Biometric Imaging  
Clontech**

Asia Pacific  
Tel (852) 8819 4333  
Fax (852) 8801 396

**Europe**

Tel (49) 11 9165 8833  
Fax (49) 11 9165 9834

**Canada**

Tel (800) 399 6187  
Fax (905) 542 5391  
[canada@bdb.com](mailto:canada@bdb.com)

**Germany**

BD Biosciences  
Tel (49) 33 720 211  
Fax (49) 33 720 480

**Europe**

Life Science Research  
Tel (44) 431 805 621  
Fax (44) 431 205 531

**Japan**

Tel (81) 3 5413 8291  
Fax (81) 3 5413 8115

**Merck**

Tel (33) 337 1300  
Fax (33) 337 1200

**United States**

Tel (877) 332 8888  
Fax (858) 412 8888



MAKING SENSE OF LIFE  
Now with BD

[7]

## REFERENCES (Continued)

6. Maly, P., A.D. Thall, B. Petryniak, C.E. Rogers, P.L. Smith, R.M. Marks, R.J. Kelly, K.M. Gersten, G. Cheng, T.L. Saunders, S.A. Camper, R.T. Camphausen, F.X. Sullivan, Y. Isogai, O. Hindsgaul, U.H. von Andrian, and J.B. Lowe. 1996. The  $\alpha(1,3)$ fucosyltransferase Fuc-TVII controls leukocyte trafficking through an essential role in L-, E-, and P-selectin ligand biosynthesis. *Cell* 86: 643 - 653.
7. Butcher, E.C. Personal communication.
8. Binns, R.M., A. Whyte, S.T. Licence, A.A. Harrison, Y.T.M. Tsang, D.O. Haskard, and M.K. Robinson. 1996. The role of E-selectin in lymphocyte and polymorphonuclear cell recruitment into cutaneous delayed hypersensitivity reactions in sensitized pigs. *J. Immunol.* 157: 4084 - 4089.
9. DiCicco, T.G., K.D. Puri, R.A. Warnock, T.A. Springer, and U.H. von Andrian. 1996. Platelet-mediated lymphocyte delivery to high endothelial venules. *Science* 273: 252 - 255.
10. Puri, K.D., E.B. Finger, G. Gaudernack, and T.A. Springer. 1995. Stalomucin CD34 is the major L-selectin ligand in human tonsil high endothelial venules. *J. Cell Biol.* 131: 281 - 270.

## For Research Use Only. Not For Diagnostic or Therapeutic Use.

Conditions: BD Pharmingen will not be responsible for violations or patent infringements which may occur with the use of our products.

Hazardous Ingredient: Sodium Azide. Avoid exposure to skin and eyes, ingestion, and contact with heat, acids, and metals. Wash exposed skin with soap and water. Flush eyes with water. Dilute with running water before discharge into plumbing.

BD Biosciences [www.bdbiosciences.com](http://www.bdbiosciences.com)Biometric Imaging  
Clontech

Asia Pacific  
Tel (852) 8610 633  
Fax (852) 8601 590

## Brazil

Tel (55) 11 5185 9031  
Fax (55) 11 5185 9834

## Canada

Tel (888) 250 0187  
Fax (905) 542 8391  
[canada@bd.com](mailto:canada@bd.com)

## Europe

BD Biosciences  
Tel (32) 33 723 211  
Fax (32) 33 720 430

## Japan

Life Science Research  
Tel (81) 6321 305 511  
Fax (81) 6321 302 531

## Korea

Tel (81) 2 5412 8251  
Fax (81) 2 5412 8155

## Mexico

Tel (52) 237 5200  
Fax (52) 237 1288

## United States

Tel (877) 232 0391  
Fax (858) 512 8888



153300-0000(D-TDS)  
Rev 004 6/00

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/009805

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>7</sup> G01N33/574

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> G01N33/53-579

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

JICST (JOIS), CA (STN)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y/A	UCHIMURA et al., "Specificities of N-acetyl glucosamine-6-0-sulfotransferases in relation to L-selectin ligand synthesis and tumor-associated enzyme expression" J.Biol.Chem., Vol.277, (2002), pages 3979 to 3984	7-9/1-6,10
Y/A	SEKO et al., "Ectopic expression of a GlcNAc 6-0-sulfotransferase, GlcNAc6ST-2, in colonic mucinous adenocarcinoma", Glycobiology, Vol. 12 (2002), pages 379 to 388	7-9/1-6,10
Y/A	JP 06-000093 A (Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.), 11 January, 1994 (11.01.94), (Family: none)	7-9/1-6,10

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
09 September, 2004 (09.09.04)

Date of mailing of the international search report  
28 September, 2004 (28.09.04)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/009805

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y/A	JP 06-046878 A (Tosoh Corp.), 22 February, 1994 (22.02.94), {Family: none}	7-9/1-6,10
A	JP 11-313684 A (Seikagaku Corp.), 06 November, 1999 (06.11.99), & EP 943688 A & US 6037159 A	1-10

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> G01N33/574

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> G01N33/53-579

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2004年
日本国登録実用新案公報	1994-2004年
日本国実用新案登録公報	1996-2004年

国際調査で利用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

JICST(JOIS), CA(STN)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y/A	UCHIMURA et al "Specificities of N-acetylglucosamine-6-O-sulfotransferases in relation to L-selectin ligand synthesis and tumor-associated enzyme expression" J Biol Chem, Vol. 277 (2002) p. 3979-3984	7-9/1-6, 10
Y/A	SEKO et al "Ectopic expression of a GlcNAc 6-O-sulfotransferase, GlcNAc6ST-2, in colonic mucinous adenocarcinoma" Glycobiology Vol. 12 (2002) p. 379-388	7-9/1-6, 10

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

- 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
「O」 口頭による開示、使用、展示等に関する文献  
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

09. 09. 2004

国際調査報告の発送日

28. 9. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

山村 祥子

2 J

9217

電話番号 03-3581-1101 内線 3261



C (続き) 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y/A	JP 06-000093 A (大塚製薬株式会社) 1994. 01. 11 (ファミリーなし)	7-9/1-6, 10
Y/A	JP 06-046878 A (東ソー株式会社) 1994. 02. 22 (ファミリーなし)	7-9/1-6, 10
A	JP 11-313684 A (生化学工業株式会社) 1999. 11. 06 & EP 943688 A & US 6037159 A	1-10